

Электромагнитный активатор ВЭГ-160

313282-131-31636677-18 ПС

Паспорт

1 Назначение

Электромагнитный активатор ВЭГ-160 предназначен для получения гомогенных смесей угольных и других немагнитных материалов с использованием магнитных агитаторов и вращающегося электромагнитного поля.

ВЭГ – 160 обеспечивает дробление и смешение исходного материала за счет быстрого вращения во вращающемся магнитном поле ферромагнитных стержней в псевдоожженном слое. При этом режим псевдоожженного слоя достигается как в газовой среде нормального или повышенного давления, так и в вакууме.

2 Технические характеристики

Таблица 1

№ п.п	Техническая характеристика	Ед. изм.	Величина
1	Напряжение питания	В	380
2	Фазный ток	А	10
	Коэффициент мощности cos	-	0,87
3	Температура нагрева рабочей зоны реактора	°С	до 600*
4	Диаметр рабочей зоны	мм	140
5	Полный объем реактора	л	6
6	Напряженность магнитного поля в пристеночной зоне, не менее	Тл	0,16
7	Температура поверхности изделия	°С	55
8	Габариты базового модуля		См. рис. 2
9	Масса обрабатываемого материала, до	кГ	0,6

*с учетом опций.

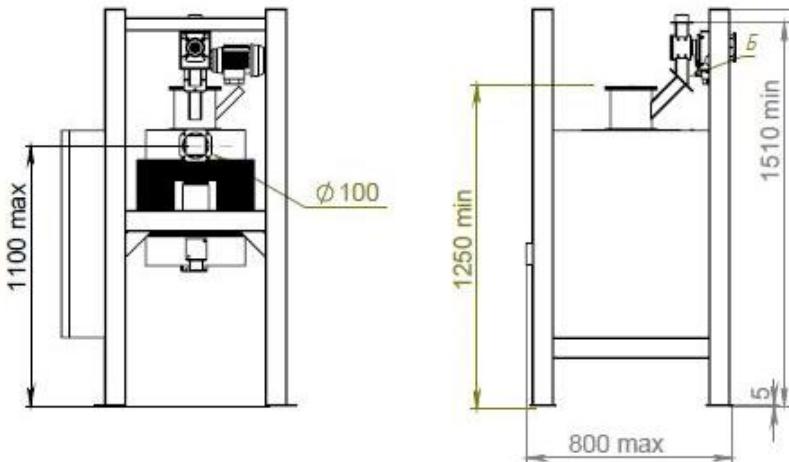


Рисунок 1

3 Комплектность

Обозначение	Наименование	Кол-во
313282-131-31636677-18	Электромагнитный активатор ВЭГ – 160	1
313282-131-31636677-18 ПС	Паспорт	1
313282-131-31636677-18 РЭ	Руководство по эксплуатации	1

4 Свидетельство об упаковке

Электромагнитный активатор ВЭГ – 160 313282-131-31636677-18 ТУ заводской №_____ упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.

Упаковку произвел (подпись)_____

Дата упаковки_____

5. Свидетельство о приемке

Электромагнитный активатор ВЭГ – 160 313282-131-31636677-18 ТУ заводской №_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____ 20____ г.

Начальник ОКК

М.П.(подпись)_____ Ф.И.О._____

Реквизиты предприятия

ООО Научно-производственное предприятие «Интор»

Адрес: 346428
г. Новочеркасск
ул. Троицкая 39/166
а/я 100
Телефон/факс (86352) 2-11-77
e-mail: market@intor.ru
www.intor.ru